

*Della beltà che in lei sempre si spiega io mai sazio  
arei. Stanco giammai: la sua beltà, a guardarla*


diry®

Massaggio Endodermico - Radiofrequenza Resistiva - Laser LLLT  
Endodermic massage - Resistive radiofrequency - LLLT



CESARE  
QUARANTA

*per ogni terra, non c'è chi le assomigli: appare quale  
solo nei sogni per forse una beltà. Dio, com e bella!*

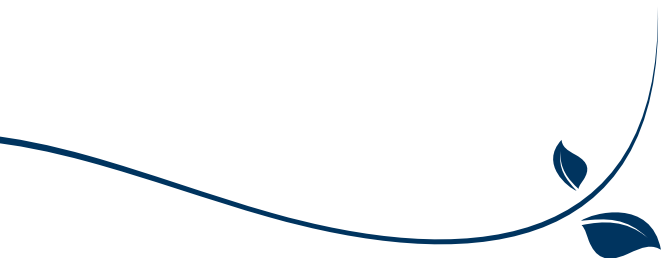

# Bellezza Certificata

## Qualità Cesare Quaranta

La Cesare Quaranta srl ha ottenuto il "certificato di gestione del sistema qualità" risultando conforme alla norma UNI EN ISO 9001:2008 per la progettazione , produzione ed assistenza tecnica di apparecchiature ad uso estetico.

La decisione della Direzione della Cesare Quaranta s.r.l. di attuare un Sistema di Gestione per la Qualità scaturisce dalla necessità di rispondere ad una clientela sempre più esigente e selettiva.

Pertanto la peculiarità su cui si basa il sistema Qualità è quella di riorganizzare le attività dell'azienda al fine di:

- soddisfare e superare, se possibile, le attese del cliente in termini di qualità di prodotto;
- consolidare ed accrescere la propria posizione sul mercato fidelizzando maggiormente il cliente;
- stabilizzare e migliorare il processo produttivo al fine di garantire la miglior funzionabilità e affidabilità possibile;
- mantenere piena attenzione al contenimento dei costi.

## Certified Beauty - Cesare Quaranta Quality

Cesare Quaranta srl is an ISO 9001:2008 certified company for projecting, manufacturing and technical servicing devices for aesthetics.

All devices produced comply with the EC standards:

- Safety. Our devices are EC marked and they comply with all the communitarian safety requirements. The high quality of our equipment is concrete and gives value to the aesthetic treatments even according to more and more demanding and selective customers.
- Efficacy. The treatment protocols are developed by professionals who have been operating for over 20 years in the aesthetic field. The aesthetic results are concrete and long-lasting, for the full consumer's satisfaction.

The company Quality System management aims at:

- Fulfilling and exceeding, if possible, the customers' expectations in terms of product quality
- Strengthening and improving its position on the market by a successful customer acquisition and long-term retention
- Stabilizing the manufacturing process in order to assure the highest functionality and reliability
- Keeping full attention to the cost saving policy





# LA REMISE EN FORME

## FIRMATA

# CESARE QUARANTA

# b

Nel rimodellamento corporeo i risultati migliori si ottengono solo attraverso un approccio scientifico all'ineestetismo che, partendo dall'analisi fisica del soggetto, non trascura nessuna delle informazioni necessarie per la definizione di un efficace protocollo snellente. Per questo motivo, a supporto dei trattamenti estetici, il metodo Cesare Quaranta prevede:

- body check up preciso e puntuale;
- percorso alimentare;
- team di consulenti a disposizione;
- programma di formazione continua.

Perdita di centimetri, riduzione della massa adiposa e dell'ineestetismo della cellulite: qualunque sia il suo obiettivo estetico, il cliente lo raggiunge attraverso un protocollo totalmente personalizzato e assistito dalla competenza di personale qualificato. I trattamenti seguono metodiche affinate in anni di ricerca e garantiscono risultati immediati e duraturi, rispettando la naturale risposta fisiologica dell'organismo.

## RESHAPING IS BRANDED CESARE QUARANTA

A scientific approach to the aesthetic imperfection is necessary when you look for the best results in body remodelling. You start with the physical analysis of the subject and gather all the important information allowing to define the most efficient slimming protocol. This is the reason why, besides the aesthetic treatments, the Cesare Quaranta method includes:

- A clear and accurate body check up
- A food programme
- A team of consultants at your disposal
- Continuous education programme

To lose inches, to remove fat and treat cellulite: it doesn't matter what is the target. The customer can achieve it through a completely customized programme, supported by the knowledge of our highly professional staff. Every treatment comes out from research over the years and guarantees fast and durable results, respecting the natural physiological response of the body.





# SPECCHIATI IN UN CORPO DA FAVOLA

Airy contrasta gli inestetismi della cellulite e gli accumuli adiposi, restituendo tono ed elasticità ai tessuti grazie all'azione combinata e contemporanea di tre tecnologie: massaggio endodermico, radiofrequenza resistiva e laser LLLT. Braccia, gambe, glutei, addome, viso e décolleté: grazie a manipoli di differenti misure, Airy si adatta e può essere usato in assoluta sicurezza su tutte le parti del corpo. Il trattamento è piacevole e gli effetti sono evidenti fin dalla prima applicazione.

#### **Airy applica simultaneamente l'effetto di:**

- Massaggio endodermico aspirato;
- Radiofrequenza resistiva;
- Laser a luce fredda (LLLT).

#### **Sul corpo Airy:**

- riduce gli accumuli adiposi;
- contrasta l'inestetismo della cellulite;
- rassoda e restituisce elasticità e tono alla pelle.

#### **Sul viso Airy:**

- riduce le rughe sottili;
- definisce l'ovale del viso;
- restituisce luminosità e tonicità alla pelle.

#### **GET A FABOLOUS BODY**

Airy is treating cellulite and fat imperfections, is toning tissues and tightening skin thanks to 3 technologies combined together and working simultaneously: endodermic massage (by suction), resistive radiofrequency and LLLT. Targeting arms, legs, hips, abdomen, face and décolleté, by different size hand-pieces, AIRY is suitable in a totally safe way to all body areas. The treatment has no counter-indications, is nice to feel and effects are visible since the first application.

#### **Airy applies at the same time the effect of:**

- Endodermic massage (by suction);
- Resistive Radiofrequency;
- Laser light (LLLT).

#### **Airy on body:**

- reduces fat;
- smooths cellulite;
- tones and firms skin.

#### **Airy on face:**

- reduces the fine wrinkles;
- redefines the facial contour;
- clarify and lift up skin.





# MASSAGGIO ENDODERMICO LASER LLLT RADIOFREQUENZA RESISTIVA

L'azione principale del massaggio endodermico è una redistribuzione delle adiposità ottenuta attraverso l'aspirazione e il successivo rilascio dei tessuti cutanei e sottocutanei. Il ciclo di funzionamento è diviso in due fasi, per una azione ora profonda e intensa, ora più dolce e rilassante.

Il massaggio endodermico sollecita il tessuto connettivo, riattiva l'attività cellulare e stimola la microcircolazione, incrementando il flusso ematico e l'ossigenazione dei tessuti. Inoltre favorisce la distensione delle fibre di collagene.

## **Laser a Luce Fredda: Azione snellente**

La sua azione è principalmente diretta al tessuto adiposo.

La luce ha la capacità di penetrare la barriera cutanea e indurre risposte fotochimiche nei tessuti target, attivando la lipolisi degli adipociti e inducendo reazioni "a cascata".

L'azione del laser accresce il gradiente della membrana del citocromo, aumenta scambi ATP e la loro sintesi, culminando nella conversione dei trigliceridi in acidi grassi e glicerolo che possono passare attraverso i pori transitori formati nella membrana.

## **Radiofrequenza Resistiva: lifting anti age**

La Radiofrequenza Resistiva contribuisce in maniera significativa al miglioramento della trama cutanea, agendo direttamente sulle fibre di collagene che costituiscono l'impalcatura della pelle.

Il suo effetto è immediato e progressivo: il miglioramento del derma è visibile fin dal termine del trattamento, e prosegue anche nei giorni successivi, con la continua attività dei fibroblasti nella sintesi di nuovo collagene.

L'ipertermia indotta dalla radiofrequenza contribuisce inoltre alla riattivazione della vascolarizzazione, necessaria per un efficace azione detossinante e per il drenaggio dei liquidi di ristagno.





## ENDODERMIC MASSAGE: IT REACTIVATES THE CONNECTIVE TISSUE FUNCTION

The main action of the endodermic massage is to move stored fat by suction. Then, the fat is released in the cutaneous and subcutaneous tissues. The operation cycle is split in 2 phases, alternating a deep and intense work to a soft and relaxing one.

The endodermic massage impacts tissues locally, reactivates the cells activity and stimulates the micro-circulation, increasing the tissue oxygenation. It also promotes the relaxation of collagen fibre.

### Laser LLT slimming action

Its action targets mainly fat tissues.

The laser light is able to go through the cutaneous barrier and solicit photochemical reactions in the target tissue, activating then the lipolysis of adipocytes and provoking enchainned reactions.

Laser light increases the gradient of the

cytochrome membrane, increases ATP exchanges and their synthesis and converts triglycerides in fat acids and glycerol which can then pass through membrane transitional pores and be released.

### Resistive Radiofrequency: anti-age lifting

Resistive radiofrequency helps in a considerable way to improve the skin texture, thanks to its direct action on collagen fibres which are the skin structure.

Its effect is immediate and progressive: improvement of derma is visible since the first treatment and goes on in the following days as the fibroblasts keeps on producing new collagen.

The hyperthermia led by radiofrequency also reactivates vascularisation which is important for a good detoxification.



# ARMONIOSO SUL CORPO

Due manipoli di differenti dimensioni permettono di trattare in sicurezza tutte le zone del corpo, ottenendo risultati straordinari nel rimodellamento e una significativa riduzione degli inestetismi di adipe e cellulite.

## **Lipomodellazione e contrasto della cellulite**

Il massaggio endodermico provoca la mobilitazione e lo scollamento degli adipociti dal tessuto connettivo. Le cellule adipose sono contemporaneamente sottoposte all'irradiazione di quattro sorgenti laser LLLT a 635nm, che ne aumenta la permeabilità della membrana, stimolando la fuoriuscita dei lipidi nella matrice extracellulare.

Il calore indotto dalla radiofrequenza migliora il flusso circolatorio favorendo il drenaggio dei liquidi di ristagno, responsabili dell'inestetismo della cellulite, e dei lipidi liberati negli spazi interstiziali.

## **Miglioramento della trama cutanea**

Il massaggio endodermico distende il tessuto connettivo e le fibre di collagene, che subiscono una denaturazione a causa dell'azione della radiofrequenza, con conseguente riattivazione della produzione di nuovo collagene ed elastina da parte dei fibroblasti.

L'effetto termico migliora la vascolarizzazione dei tessuti periferici e la loro ossigenazione, restituendo tonicità e colore alla pelle. Il risultato è un rapido miglioramento della trama cutanea.

## SCULPTING ON BODY

Two hand-pieces of different size allow to safely treat all body areas. The results in reshaping are extraordinary and the reduction of cellulite and fat imperfections is considerable.

### Liposculpting and cellulite smoothing

The endodermic massage promotes the mobilisation of adipocytes from the connective tissue. The fat cells are submitted to 4 laser light at the same time coming from 4 LLLT sources at 635 nm. This increases the permeability of their membrane thus stimulating the fat release. The heat provoked by radiofrequency improves the blood circulation promoting both drainage of stored liquids, responsible for cellulite appearance, and release of fat.

### Improvement of skin texture

The endodermic massage redensifies the connective tissue and relaxes the collagen fibres. Thanks to radiofrequency, the production of new collagen and elastin by fibroblasts is reactivated.

The thermal effect improves the microcirculation of tissues and their oxygenation, thus skin texture regains clarity, tone and firmness.



# DELICATO SUL VISO

Il manipolo permette di ospitare quattro testine intercambiabili che consentono una azione più precisa su tutte le aree del viso, del collo e del décolleté.

Sul viso il massaggio endodermico contribuisce a riattivare e ristrutturare il tessuto connettivo rassodando la pelle, incrementando la microcircolazione e l'ossigenazione dei tessuti. Il risultato è un immediato rimodellamento dell'ovale, con una evidente riduzione delle rughe sottili fin dalla prima seduta. Soprattutto dove appariva più fragile e atona, la pelle ritrova la giusta elasticità e luminosità.

#### **Sul Viso Airy:**

- riduce le rughe sottili;
- definisce l'ovale del viso;
- restituisce luminosità e tonicità alla pelle.

#### **GENTLE ON FACE**

The 4 interchangeable heads of the hand-piece allow a targeted action on all face, neck and décolleté areas.

The endodermic massage on face reactivates and restores the connective tissue and firm the skin stimulating the production of new collagen and elastin and increasing the micro-circulation and oxygenation of tissues.

An immediate redefinition of the facial contours and an important reduction of the fine wrinkles are visible since the first session. Especially where the skin appeared fragile and dull, the correct elasticity and radiance are restored.

#### **Airy of face:**

- reduces the fine wrinkles
- defines the facial contour
- restores skin radiance and tone

# RASSEGNA SCIENTIFICA

## SCIENTIFIC INFORMATION

Conclusioni estratte dall'articolo "Low Level Laser-Assisted Lipoplasty Appearance of Fat Demonstrated by MRI on Abdominal Tissue" pubblicato su "The American Journal of Cosmetic Surgery – Vol 18 N. 3,2001" nel quale **si evidenziano i cambiamenti strutturali del tessuto adiposo in seguito all'esposizione al fascio laser a 635 nm osservati attraverso una risonanza magnetica (MRI).**

A cura di: Rodrigo Neira, MD; Robert Jackson, MD; Douglas Dedo, MD; Clara Lucia Ortiz, MD; Jose Alejandro Arroyave, Br

“After 6 minutes of laser exposure, the MRI demonstrated that the adipose tissue is much more coalescent and is blurred. The fatty density and organization seems to have changed completely after exposure to the laser beam for this period of time. (The scanning electron microscope revealed that at this particular time 100% of the fat was in the interstitial space and the transitory pore was now open.) The MRI evaluation of the subcutaneous fat seems to correlate well with the findings of cutaneous fat seems to correlate well with the findings of the scanning electron microscope, showing that there is a definitive change in the consistency of the subcutaneous fat following exposure to the low-level electronic diode laser.”

Conclusioni estratte dall'articolo "Reduction in adipose tissue volume using a new high-power radiofrequency technology combined with infrared light and mechanical manipulation for body contouring" pubblicato su "Laser in Medical Science" l'1 Aprile 2014 nelle quali **si sostiene l'efficacia della combinazione di radiofrequenza resistiva, luce infrarosso e vacuum nella riduzione di volume del tessuto adiposo e nel rassodamento della pelle.**

A cura di: Maurice A. Adatto, Robyn M. Adatto-Neilson, and Grietje Morren

“In conclusion, the combination of bipolar RF, IR light, and mechanical tissue manipulation with pulsed vacuum and massage rollers appears to be a safe and effective therapeutic modality for the reduction of adipose tissue volume and skin tightening.”



Conclusioni estratte dall'articolo "Adipocyte Membrane Lysis Observed After Cellulite Treatment Is Performed with Radiofrequency" pubblicato su Aesthetic Plastic Surgery, dove si evidenzia l'alterazione della matrice dell'adipocita sottoposto a radiofrequenza.

A cura di: Mario A. Trelles e Serge R. Mordon /Published online: 27 November 2008

“

Because heat is required to initiate collagen and/or fat cells denaturation, it is apparent that the temperature developed by RF inside the tissue, e.g., at the subcutaneous fat layer level, was producing alterations in the subcutaneous skin layer. Adipocyte matrix properties manifested marked changes in their characteristics as membrane lysis decreases volume and thickening of their membrane. ”



# EMOZIONI A PORTATA DI MANO

Sono disponibili tre manipoli ergonomici specifici per viso e corpo.

Tutti i manipoli in dotazione con il dispositivo sono stati studiati per erogare contemporaneamente ed uniformemente il trattamento vacuum, la radiofrequenza resistiva e l'irradiazione da quattro fonti laser LLLT a 635nm.

In aggiunta alla camera d'aspirazione principale, i manipoli corpo ospitano due camere laterali che permettono di coprire nello stesso tempo una superficie maggiore e assicurare una efficace alternanza di compressione e decompressione dei tessuti trattati.

## Programmi Preimpostati

L'apparecchiatura offre programmi pre impostati per il viso e per il corpo ed un programma totalmente personalizzabile per l'operatore più esperto.

I programmi viso e corpo svolgono cicli a differenti livelli di pressione vacuum per creare dinamicità e attivare maggiormente il tessuto. E' inoltre previsto un programma che esercita una azione costante.

Per favorire il confort del cliente durante il trattamento, è possibile selezionare il livello ideale di radiofrequenza.

Touch Screen facile da usare

## KEEP YOUR EMOTIONS ON HAND

three ergonomic hand-pieces, specifically designed for face and body.

All of them have been conceived to evenly release at the same time suction, resistive radiofrequency and 4 LLLT laser beams at 635nm.

Additionally to the main suction chamber, the body hand-pieces have 2 lateral chambers allowing to treat a bigger area and to assure an effective alternating compression and depression on the target tissues.

## Preset programs

The device has preset programs for face and body and a totally customizable program for the most expert operator.

The programs for face and body perform cycle of changing suction intensity to create a dynamic massage and activate the tissues better. A program with a constant degree of suction is also available.

For the highest comfort of the customer during the treatment, it is possible to adjust the ideal level of radiofrequency.

The device is equipped with an easy to use touchscreen.



Riduzione delle lassità cutanee  
Firming up and toning



Riduzione delle rughe  
Wrinkles reduction



#### IL "MADE IN ITALY" CESARE QUARANTA

- Sviluppo di brevetti esclusivi
- Design esclusivo, funzionale e compatto
- Progettazione e produzione in sede
- Apparecchiature sicure
- Alta qualità dei materiali
- Metodiche efficaci

#### "MADE IN ITALY" BY CESARE QUARANTA IS:

- Development of exclusive methods
- Unique, practical and compact design
- Design and Manufacturing in the factory
- Safe, Reliable and long-lasting devices
- High-quality materials
- Effective Programs



Contrasto dell'ineestetismo della cellulite  
Targeting cellulite imperfections



Riduzione dell'adipe localizzato  
Localized fat reduction

# Dotazioni STANDARD.

## **FORNITURA STANDARD**

- N. 1 Apparecchiatura Airy
- N. 1 Manipolo piccolo viso per vacuum
- N. 1 Manipolo corpo grande per Vacuum, RF e Luce Rossa
- N. 1 Manipolo corpo medio per Vacuum, RF e Luce Rossa
- N. 6 Flaconi QF Cream da 250ml
- N. 2 Occhiale protezione per laser
- N. 1 Cavo Di Alimentazione
- N. 1 Manuale D'uso E Manutenzione

## **STANDARD SUPPLY**

- N. 1 Airy Device
- N. 1 Small hand piece for face
- N. 1 Large hand piece for body (Vacuum, RF, Red Light)
- N. 1 Medium hand piece for body (Vacuum, RF, Red Light)
- N. 6 QF Cream 250 ml bottle
- N. 2 Protective goggles for laser
- N. 1 Supply Cable
- N. 1 Use and maintenance manual





## Assistenza e garanzia.

Certezza e tranquillità di avere in ogni momento tecnici specializzati a tua completa disposizione.

**Numero Verde**  
**800-268616**

è il numero verde di assistenza al cliente. Cesare Quaranta è a tua disposizione per fornirti tempestivi servizi di intervento tecnico e per rispondere ad ogni tua esigenza o richiesta di informazioni inerenti all'utilizzo dei dispositivi.

Le apparecchiature Cesare Quaranta sono garantite da difetti di materiale e di costruzione per un periodo di 12 mesi.

### Assistance And Warranty

Our specialized technicians at your complete disposal at any time.

Cesare Quaranta is ready to provide you with immediate technical assistance, and to answer all your requests or to get back to you with information regarding the use of a device.

Cesare Quaranta devices are guaranteed against defects in materials and construction for a 12-month period.



# FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA

Cesare Quaranta s.r.l. organizza periodici appuntamenti dedicati alla formazione di professionisti. Questo consente agli operatori di mantenersi continuamente aggiornati grazie al know-how che l'azienda mette a loro disposizione, consentendogli di mantenere una elevata professionalità per garantire al cliente un servizio migliore.

I corsi di formazione Cesare Quaranta toccano tutte le problematiche del business dell'estetica e coinvolgono professionisti del settore: tecnici specializzati nell'uso delle apparecchiature, dietisti ed esperti di mercato, per fornire un panorama quanto più completo possibile di servizi. Non solo corsi tecnici sui trattamenti estetici quindi, ma anche corsi di alimentazione, di relazione con la clientela e di marketing. Una adeguata preparazione professionale costituisce elemento di tutela per il cliente che ricerca servizi estetici di qualità.

## CONTINUOUS PROFESSIONAL TRAINING

Cesare Quaranta company regularly holds training lectures dedicated to dealer's staff and sales force. Our know-how is shared to allow our customers to be always updated and well trained. This allows our dealers to keep a high professionalism and expertise and assure to his customers a constantly good service. A correct professional training is a guarantee for the customer who looks for high quality aesthetic service.



# COMUNICAZIONE VINCENTE

La Cesare Quaranta s.r.l. risponde alle tue esigenze di pubblicità mettendoti a disposizione un team di esperti che conoscono bene il mondo della comunicazione e sanno interpretare le tendenze e gli andamenti del settore dell'estetica.

Ogni apparecchiatura è accompagnata da un'ampia scelta di materiale pubblicitario da personalizzare sulla base dei tuoi gusti e necessità: poster per affissione esterna, volantini, inviti alla prova, banner, cartellonistica e vetrofanie pensate per il tuo punto vendita.

L'ufficio marketing può assisterti anche in campagne pubblicitarie su mezzi a più ampia diffusione come la stampa quotidiana o periodica, le radio o televisioni locali, offrendoti supporto in tutte le fasi della pianificazione pubblicitaria e suggerendoti progetti promozionali di sicuro interesse per la clientela ed economicamente remunerativi per la tua attività.

La nostra ventennale esperienza nel settore dell'estetica e la nostra visione strategica del mondo della comunicazione ci rendono un elemento cardine della tua strategia.

## COMMUNICATION AND MARKETING

For a beauty centre it is essential to create its own image and to spread it with the most suitable tools to reach new clients and make the just purchased aesthetic device immediately money-making.

Cesare Quaranta company fulfil your publicity needs by giving you the support of a skilled team who well know the world of communication and who understands the last trends in aesthetics.

Each device is completed by a wide choice of advertising material to be customised according to your taste and need: outside posters, leaflets, invitations to test, banners, billboards and window stickers studied for your sale point.

The marketing department can assist you also by offering you support in all the strategic and operative advert planning phases, and by suggesting you promotional projects of considerable interest for the customers and profitable for your activity.

Our 20-year experience in aesthetics and our strategic vision of the communication world make us a key element of your marketing plan.

Specchiati  
in un corpo  
da favola.



**CESARE QUARANTA** **airy**

**Prova Qui**  
L'azione combinata di massaggi endodermico, radiofrequenza e laser lipolitico nel contrasto di adipe e cellulite\*.  
**Riduci, drena, rassoda, definisci.**  
\*neestitismo della cellulite

Roll-up cm 80x200

Specchiati  
in un corpo  
da favola.



**CESARE QUARANTA** **airy** **Prova Qui**  
L'azione combinata di massaggio endodermico, radiofrequenza e laser lipolitico nel contrasto di adipe e cellulite\*.  
**Riduci, drena, rassoda, definisci.**  
\*neestitismo della cellulite

Vetrofania cm 70x100

La soluzione  
rapida e duratura  
agli inestetismi  
di adipe  
localizzato  
e cellulite.

Riscopri un  
corpo da  
Favola.



**airy**

**ELITE s.p.a.**  
Via De Amicis, 3 - Matera  
Tel. 0835 712133

**RIDUCI, DRENA,  
RASSODA, DEFINISCI**  
Risultati straordinari fin  
dalle prime sedute.  
Accumuli ridotti, pelle  
vellutata, curve ridefinite.

**PRONOTA LA TUA  
PROVA GRATUITA\***  
\*non cumulabile

Volantino A5 fronte e retro

**CESARE QUARANTA** **airy** **RIDUCI, DRENA,  
RASSODA, DEFINISCI**

Il massaggio endodermico provoca lo scioglimento degli adipociti del tessuto connettivo. Allo stesso tempo, le cellule adipose sono sottoposte all'irradimento del laser LLLT, che ne aumenta la permeabilità delle membrane, stimolando la fuoriuscita dei lipidi nella matrice extracellulare. La radiofrequenza stimola la collagenogenesi e migliora il flusso circolatorio favorendo il drenaggio dei liquidi di ristagno.




**RISULTATI STRAORDINARI  
FIN DALLE PRIME SEDUTE**  
ACCUMULI RIDOTTI,  
PELLE VELLUTATA,  
CURVE RIDEFINITE.



**ELITE s.p.a.**  
Via De Amicis, 3 - Matera  
Tel. 0835 712133

**PRONOTA LA TUA  
PROVA GRATUITA\***  
\*non cumulabile

## SCHEDA TECNICA

Alimentazione 230 V, 50/60 Hz  
Potenza Assorbita 250 VA

### VACUUM

Pompa a vuoto  
- Pressione nominale finale 150 mBar (abs)  
- Capacità nominale di aspirazione 3-3,6 m3/h

Modi di funzionamento Aspirazione continua | Aspirazione intermittente  
Possibilità di modulare l'aspirazione (funzione "vibrazione")

### RADIOFREQUENZA

Modalità Resistiva  
Frequenza 500 kHz  
Potenza 25 W

### LUCE ROSSA

Numero di sorgenti 4  
Lunghezza d'onda 635 nm  
Potenza 28 mW  
Fusibili di rete 3,15 A – Ritardato – 5 x 20  
Dimensioni 600 x 480 x 430mm  
Peso 25 kg  
Classificazione I, tipo B  
Conformità Direttiva 2014/30/CE | Direttiva 2014/35/CE  
Temperatura di lavoro 12° - 30° C  
Umidità relativa 30 - 75%, senza condensa

## TECHNICAL DATA SHEET

Power Supply 230 V, 50/60 Hz  
Power absorption 250 VA

### VACUUM

Vacuum pump  
- Final rated pressure 150 mBar (abs)  
- Suction rated capacity 3-3,6 m3/h

Operation modes Continuous suction | Intermittent suction  
Possible modulation of suction ("vibration" mode)

### RADIOFREQUENCY

Type Resistiva  
Frequency 500 kHz  
Power 25 W

### RED LIGHT

Number of light sources 4  
Wave length 635 nm  
Power 28 mW  
Fuse network 3,15 A – Delayed – 5 x 20  
Dimensions 600 x 480 x 430mm  
Weight 25 kg  
Classification I, type B  
Compliance Directive 2014/30/CE | Directive 2014/35/CE  
Operating temperature 12° - 30° C  
Relative humidity 30 - 75%, without condensation



*Vieni dal ciel profondo o l'abisso t'esprime,  
Bellezza? Dal tuo sguardo infernale e divino  
piovono senza scelta il beneficio e il crimine,  
e in questo ti si può apparentare al vino.*

*Hai dentro gli occhi l'alba e l'ocaso, ed esali  
profumi come a sera un nembo repentino;  
sono un filtro i tuoi baci, e la tua bocca è un calice  
che disanima il prode e rincuora il bambino.*

*Sorgi dal nero baratro o discendi dagli astri?  
Segue il Destino, docile come un cane, i tuoi panni;  
tu semini a casaccio le fortune e i disastri;  
e governi su tutto, e di nulla t'affanni.*

*Bellezza, tu cammini sui morti che deridi;  
leggiadro fra i tuoi vezzi spicca l'Orrore, mentre,  
pendulo fra i più cari ciondoli, l'Omicidio  
ti ballonzola allegro sull'orgoglioso ventre.*

*Torcia, vola al tuo lume la falena accecata,  
crepita, arde e loda il fuoco onde soccombe!  
Quando si china e spasima l'amante sull'amata,  
pare un morente che carezzi la sua tomba.*

*Venga tu dall'inferno o dal cielo, che importa,  
Bellezza, mostro immane, mostro candido e fosco,  
se il tuo piede, il tuo sguardo, il tuo riso la porta  
m'aprono a un Infinito che amo e non conosco?*

*Arcangelo o Sirena, da Satana o da Dio,  
che importa, se tu, o fata dagli occhi di velluto,  
luce, profumo, musica, unico bene mio,  
rendi più dolce il mondo, meno triste il minuto?*

*Charles Baudelaire*

*la sua beltà, a guardarla, sempre si rinnovella;  
sempre ad ognuno parla e di grazia e d'amor.*



CESARE  
QUARANTA

**CESARE QUARANTA s.r.l.**

Via Legnanino, 5 - 10023 Chieri (TO) Italy - Tel. +39 0119427967 - +39 0119472132 Fax +39 0119472299  
www.cesarequaranta.it - e-mail: info@cesarequaranta.it