



Mya®



Test bio-impedenziometrico.

MYA® consente di effettuare un'analisi della bio-impedenza del cliente attraverso il semplice posizionamento degli elettrodi sulla mano e sul piede. Il corpo viene attraversato da un segnale sinusoidale assolutamente indolore. È sufficiente impostare una serie di dati relativi alla struttura morfologica del cliente per elaborare attraverso precisi algoritmi, la **massa magra, la massa grassa, le acque totali e intra-cellulari, e il numero delle sedute consigliate suddivise in quattro sezioni: trattamenti snellenti, drenanti, cellulite*, rassodanti.** È possibile ripetere il test a distanza di tempo sullo stesso cliente inserendo la sua chip-card e visualizzare il nuovo test bio-impedenziometrico confrontandolo con il precedente per analizzarne le variazioni e stabilire un ciclo di mantenimento.

Mya® can perform a Bio Impedance analysis of the body, by means the positioning of special electrodes on hand and foot of the client. A sinusoidal signal passes through the body in a total painless way. It is sufficient to set a data series relating to body structure and by means of proper algorithms, the equipment will process following data: **free fat mass, fat mass, total water, intra-cell water and total advised sessions, which will be divided into four groups: slimming, draining, cellulite*, firming-up treatments.** It is possible to repeat the BIA test, comparing the results with previous ones, in order to analyze the variation and to fix a maintenance cycle treatments.

Chip card

Il numero dei trattamenti suggeriti dal test può essere modificato in base alle esigenze del cliente prima di essere memorizzato sulla chip card personale. Per ogni sessione di trattamenti consigliati si seleziona poi il programma più indicato tra i 22 programmi disponibili in Mya® da eseguirsi in quella seduta e lo stesso sarà poi automaticamente scalato dal numero totale di trattamenti. Le chip card possono essere riutilizzate per nuovi clienti effettuando la cancellazione dei dati presenti, prima di procedere ad una nuova memorizzazione.

The number of advised treatments can be modified according to client needs, before being stored on the personal chip card. For each menu of the advised treatments [cellulite*, slimming, draining, toning] Mya® will suggest the right program among the 22 methods dedicated to the beauty defect. At the end of the treatment the chip card will count down the performed session. Chip card can be used for new clients, by deleting old data contained, before storing data of the new client.

*inestetismo della cellulite
*unsightliness of cellulite

Mya®

Tipo apparecchio
Elettrostimolazione e ultrasuoni

Alimentazione
220/250 V monofase, 50/60 Hz

Potenza assorbita
170 VA MAX

Stadio di uscita
Onda quadra - corrente di Kotz
Ultrasuoni

Frequenza onda quadra
1 KHz modulata a 33/66/133/200 Hz

Frequenza onda di Kotz
2500/4000/5000 Hz modulata a 4/6/8/12/50/75/100 Hz

Corrente massima di uscita
60 mA su carico di 1.000 Ω

Frequenza ultrasuoni
3 MHz

Potenza ultrasuoni
0,5 W/cm² (valore massimo)

Corrente per BIA
0,8 mA a 5 kHz, 50kHz, 100kHz

Numero canali di uscita
8 a destra e 8 a sinistra per l'ultrasuono
4 a destra e 4 a sinistra per l'elettrostimolazione, regolabili singolarmente per ogni uscita con indicazione di livello analogica e digitale sul display

Programmi
9 programmi preimpostati + 2 programmi viso per elettrostimolazione tradizionale
11 programmi preimpostati per ultrasuoni e/o elettrostimolazione:
1 programma per impedenziometria
1 programma per gestione chip card
1 programma contatori

Tempo di trattamento
Impostato dal software in automatico, ma modificabile a piacere da 5 a 99 minuti

Fusibili di rete
2 x 1 A tipo T 5 x 20

Dimensioni
500 x 1230 x 360 mm

Peso
30 kg

Classificazione
Classe I tipo BF

Conformità: Direttiva 2006/95/CE - Direttiva 2004/108/CE - CEI 62-39

Limiti di temperatura
da 5° C a 40° C (durante l'uso)

Il costruttore si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche ed estetiche, al fine di migliorare il prodotto, senza preavviso alcuno.

Copyright Cesare Quaranta srl 2008. I diritti di traduzione, memorizzazione elettronica, riproduzione e adattamento totale o parziale con qualsiasi mezzo (compresi microfilm, e copie fotostatiche) sono riservati per tutti i paesi.

EQUIPMENT KIND
Electro-stimulation and ultrasounds

POWER SUPPLY
220/250 V single phase, 50/60 Hz

MAX POWER ABSORBED
170 VA

WAVE FORMS
Square wave - Kotz current
Ultrasounds

SQUARE WAVE FREQUENCY
1 KHz modulata a 33/66/133/200 Hz

KOTZ WAVE FREQUENCY
2500 / 4000 / 5000 Hz reduced at 4 / 6 / 8 / 12 / 50 / 75 / 100 Hz

MAX OUTPUT CURRENT
60 mA on a load of 1.000 Ω

ULTRASOUNDS FREQUENCY
3 MHz

ULTRASOUND POWER
0,5 W/cm² (maximum value)

BIA CURRENT
0,8 mA a 50 kHz (for Mya 2008 version only, 5 kHz and 100 kHz)

NUMBER OF OUTPUT CHANNELS
8 right and 8 left for ultrasound
4 right and 4 left for electro-stimulation, singly adjustable for each output, with analogical level indication and digital indication on display

PROGRAMS
9 preset body programs + 2 face programs for electro-stimulation only
11 preset body programs for ultrasounds and/or electro-stimulation
1 Bio Impedance program
1 chip card program
1 counter program

TREATMENT TIME
Automatically set by the software, but adjustable from 5 to 99 minutes according to needs

MAIN FUSES
2 x 1 A type T 5 x 20

DIMENSIONS
500 x 1230 x 360 mm

WEIGHT
30 kg

DEVICE RANKING
Class I type BF

COMPLIANCES: Directive 2006/95/CE - Directive 2004/108/CE - CEI 62-39

TEMPERATURE LIMITS
from 5° C to 40° C (while using)

*For temperatures below 5° C, remove water from the hydraulic circuit

The Manufacturer reserves the right to introduce technical and aesthetics modifications in order to improve the Products without giving any notice.

Copyright Cesare Quaranta Srl 2008. The rights of translation, electronic records, copy, total or partial adjustment by whichever instrument (microfilm and photostatic copies included), are reserved. The copyright is enforced in all Countries.



CESARE QUARANTA s.r.l. Unipersonale
Via Legnanino, 5 - 10023 Chieri (TO) Italy
Tel. +39 0119427967 - +39 0119472132 Fax +39 0119472299
www.cesarequaranta.it - e-mail: info@cesarequaranta.it



PER INFORMAZIONI DETTAGLIATE TELEFONARE AL **Numero Verde 800-268616**



progettiamo bellezza

Mya®

Ti senti prigioniera della cellulite?

Do you feel prisoner of the Cellulite ?

*inestetismo della cellulite
*unsightliness of cellulite





LIPOMODELLATORE a medie frequenze e ultrasuoni

LIPO-MODELLING with medium frequencies and ultrasounds

Tonificazione, snellimento, lipolisi, rimodellante, massaggio decontratturante, inestetismo della cellulite, drenaggio

Toning, slimming, lipolysis, modelling, relaxing massage, unsightliness of cellulite, drainage

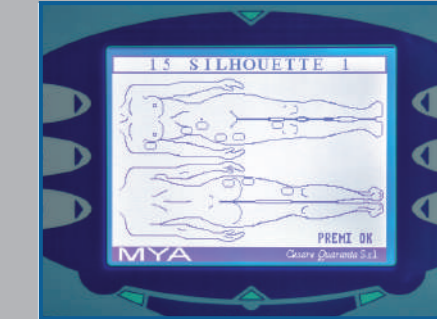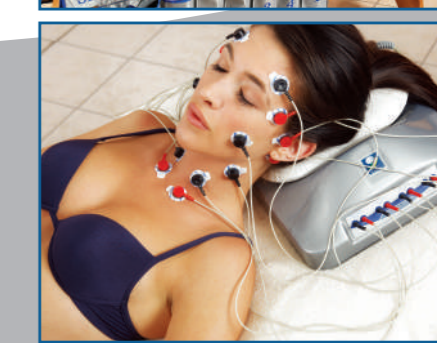

Mya® Semplicemente unica

per i trattamenti snellenti, rimodellanti e anti cellulite* in grado di garantire risultati immediati e duraturi.

MYA® consente di:

- Effettuare test bio-impedenziometrico per stabilire protocolli personalizzati per i clienti.
- Scegliere i trattamenti tra gli 11 programmi che prevedono l'emissione contemporanea sulle 16 piastre di elettrostimolazione e ultrasuono.
- Selezionare tra gli 11 programmi di elettrostimolazione con l'uso degli elettrodi pregelati e l'abbinamento delle piastre emittenti ultrasuono.
- Memorizzare sulla chip card i dati del cliente utili per personalizzare il protocollo.

Simply Unique For slimming, re-modelling and anti-cellulite* treatments, which grant immediate and long-lasting results.

With Mya you can:

- Make the Bio Impedance Test to set personalized protocols for every client.
- Choose the most suitable treatment for the customer among the 11 programs which perform the contemporary emission of electro stimulation and ultrasound, by means of 16 emitting plates.
- Choose the most suitable treatment for the client, between the 11 programs which perform only electro-stimulation by means of pre-gelled electrodes, combining them if needed with plates which will emit only ultrasounds.
- Store the client data on the Chip Card, in order to set personalized protocols.

Metodiche di elettrostimolazione e ultrasuono contemporanei, con 16 piastre

Metodiche di elettrostimolazione con elettrodi e piastre emittenti ultrasuono


L'unicità di MYA® risiede nel brevetto della Cesare Quaranta s.r.l. che ha reso possibile l'emissione contemporanea di elettrostimolazione e ultrasuono sullo stesso supporto, 16 piastre emittenti le due sorgenti. Ben 11 i programmi tra i quali muoversi per scegliere il trattamento ideale per lo snellimento, la cellulite*, il drenaggio, la lipolisi, il rassodamento, la tonificazione tessutale e/o muscolare.

L'ultrasuono agisce indebolendo la struttura del tessuto cellulitico*, in particolare le membrane degli adipociti; il micromassaggio tessutale, la produzione locale di calore e l'intrinseco effetto drenante producono fenomeni di dissociazione molecolare e contribuiscono al progressivo scioglimento del nodulo di cellulite*.

Altri 11 programmi prevedono l'utilizzo di 8 canali di elettrostimolazione che consentono il posizionamento di un numero elevato di elettrodi pregelati, ben 32 elettrodi di dimensioni differenti a seconda dell'area da trattare e del programma selezionato.


MYA® prevede la possibilità di utilizzare in associazione all'elettrostimolazione con elettrodi anche un numero variabile di piastre, a seconda dell'area colpita da inestetismo, che in questa combinazione emettono esclusivamente ultrasuono. L'associazione di queste due metodiche distinte permette di definire e mantenere i risultati ottenuti in tempi rapidi.

PRIMA

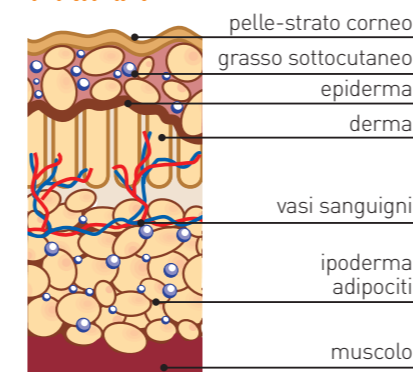

Before

DOPO

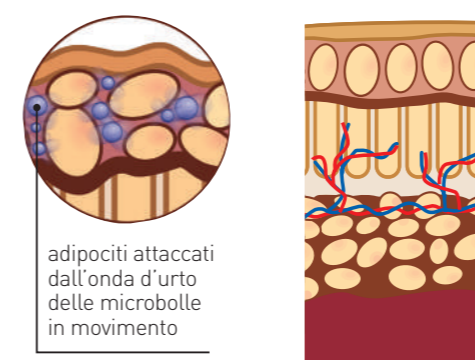

After

adipociti attaccati dall'onda d'urto delle microbolle in movimento

Method of contemporary emission of electro-stimulation and ultrasounds, by means of 16 emitting plates.

Method of electro-stimulation by means of electrodes and plates emitting only ultrasounds:

What makes Mya® unique is the patented system by Cesare Quaranta Srl which includes the combined emission of two separate sources, electro-stimulation and ultrasound on a single support, 16 plates, which can emit the two sources at the same time. 11 programs between which it is possible to choose the ideal treatment for slimming, cellulite*, drainage, lipolysis, firming up, tissue and muscle toning. The ultrasound weakens cellulite* tissue structure, mainly fat cells membrane; the micro-massage made at tissue level, the local heat production and the essential draining effect induce a progressive unfastening of the cellulite* nodule.

further 11 programs working by means of 8 channel for electro-stimulation which allow the positioning of 32 electrodes of different dimensions, according to the area to be treated and to the chosen program. With Mya® it is also possible to combine the plates, which will emit only ultrasounds, to the electro-stimulation with electrodes. The combining of these distinct methods allows maintain the results obtained and to treat-quickly and effectively- different beauty defects on different body areas.

Scopri il mondo di Mya®

Discover MYA® world!

- 4 strumenti in uno per ottimizzare i risultati offerti alla clientela.
- 22 programmi con possibilità di personalizzazione per la gestione cliente/macchina.
- Una grande varietà di forme d'onda e frequenze finalizzate al risultato finale.
- 8 canali sdoppiabili a 16, per l'applicazione di 32 elettrodi.
- Trattamenti pre-selezionati facilmente modificabili.
- Visualizzazione dei diagrammi corpo, previa selezione del programma, per consentire il corretto posizionamento di elettrodi e piastre e la massima rapidità nella fase di preparazione al trattamento.
- Auto test iniziale per il check up della funzionalità dell'apparecchio.
- Un comodo marsupio per il posizionamento delle 16 piastre e dei cavi per l'elettrostimolazione e del materiale di consumo.
- Messaggio di benvenuto con sintesi vocale.
- Il design raffinato e premiato con l'Aesthetic Award la rende un elegante e funzionale elemento d'arredo; verticale e di minimo ingombro è facile da spostare grazie alle ruote piroettanti e con freno.
- Un encoder permette di selezionare velocemente i menù ed impostare i parametri personalizzabili dei vari programmi.
- Una dotazione standard di accessori di qualità e massima affidabilità.

- 4 devices in one to optimize the results offered to clients.
- 22 Programs with the possibility of personalize protocols for a better client/equipment managing.
- A big variety of wave-forms and frequencies oriented to the best final results.
- 8 channels which can be doubled into 16, allowing the usage of 32 electrodes.
- Pre-set programs which can be easily modified.
- Viewing of body diagrams, upon selection of the desired program, in order to allow the correct positioning of the electrodes and plates and the maximum quickness while preparing phase.
- Self-test to check the correct functioning of the equipment.
- A handy bumbag to place 16 plates and cables for electro-stimulation and all consumption material
- Welcome vocal message.
- Refined design, awarded with Aesthetic Award, which makes Mya® an elegant a unctional furnishings element; with its vertical and compact shape, it is easy to be moved in absolute security thanks to its wheels with break system.
- An encoder allows to easily and quickly select menus and to set parameters of different programs.
- A standard supply of reliable and high-quality accessories.