



*Della beltà che in lei sempre si spiega io mai sazio
sarei. Stanco giammai: la sua beltà, a guardarla*

LLLT Stim Matt

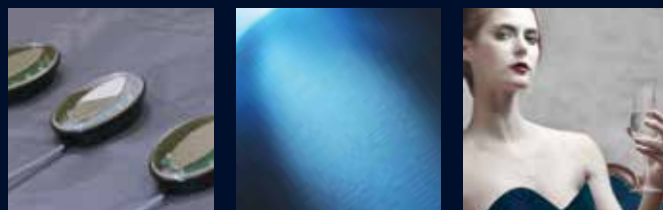

CESARE
QUARANTA

*per ogni terra, non c'è chi le assomigli: appare qualse
solo nei sogni per forse una beltà. Dio, com e bella!*

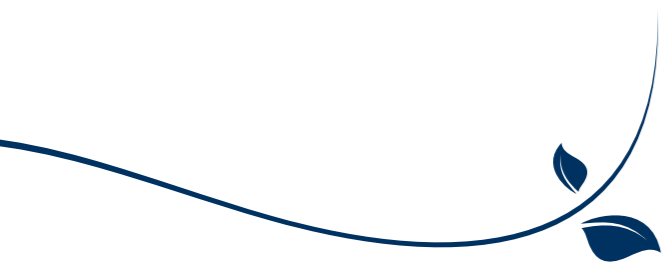

Bellezza Certificata

Qualità Cesare Quaranta

La Cesare Quaranta srl ha ottenuto il "certificato di gestione del sistema qualità" risultando conforme alla norma UNI EN ISO 9001:2008 per la progettazione, produzione ed assistenza tecnica di apparecchiature ad uso estetico.

La decisione della Direzione della Cesare Quaranta s.r.l. di attuare un Sistema di Gestione per la Qualità scaturisce dalla necessità di rispondere ad una clientela sempre più esigente e selettiva.

Pertanto la peculiarità su cui si basa il sistema Qualità è quella di riorganizzare le attività dell'azienda al fine di:

- soddisfare e superare, se possibile, le attese del cliente in termini di qualità di prodotto;
- consolidare ed accrescere la propria posizione sul mercato fidelizzando maggiormente il cliente;
- stabilizzare e migliorare il processo produttivo al fine di garantire la miglior funzionalità e affidabilità possibile;
- mantenere piena attenzione al contenimento dei costi.

Certified Beauty - Cesare Quaranta Quality

Pushed by the passion of its founder and strong with its own craft Cesare Quaranta srl is a certified company for quality system managing according to standards UNI EN ISO 9001:2008 for design, technology production, and technical assistance on aesthetic devices.

The top management decision to follow a System for Quality Management is due to the willing of respond to customers needs.

The quality system has the peculiarity to reorganize the company in order:

- To meet and to exceed, if possible, the expectations of the customer in terms of product quality;
- To consolidate and to increase market position building customer loyalty
- To stabilize and to improve the production process in order to ensure the best Functionality and reliability
- To pay attention to cost containment.



LLLT Stim Matt

INNOVATIVA, EFFICACE: L'AZIONE COMBINATA DI LIPOLASER ED ELETTROSTIMOLAZIONE

b



LLLT STIM MATT grazie all'azione combinata delle due metodiche, elettrostimolazione e lipolaser, garantisce risultati immediati e duraturi nei trattamenti snellenti, rimodellanti e di contrasto alla cellulite*.

Low Level Laser Therapy in ogni piastra sono installate 6 sorgenti laser LLLT dalla lunghezza d'onda di 655 nm da 28 mW a emissione continua. La luce ha la capacità di penetrare la barriera cutanea e indurre risposte fotochimiche nei tessuti trattati, attivando la lipolisi degli adipociti e inducendo reazioni "a cascata". L'azione del laser accresce il gradiente della membrana del citocromo, aumenta scambi ATP e la loro sintesi, culminando nella conversione dei trigliceridi in acidi grassi e glicerolo che possono passare attraverso i pori transitori formati nella membrana.

L'**elettrostimolazione** agisce grazie a impulsi profondi, inducendo un lifting muscolare e cutaneo che migliora l'assegnazione e la rivitalizzazione dei tessuti favorendo gli scambi metabolici e l'eliminazione delle tossine. L'emissione controllata di correnti dalle differenti forme d'onda, modulate a frequenza che variano dai 33 Hz ai 5.000 Hz, consente l'esecuzione di protocolli estetici personalizzabili ed efficaci.

- piastre LLLT-STIM, per trattamenti snellenti e di contrasto all'inestetismo della cellulite ancora più efficaci, rapidi e duraturi;
- Forme d'onda progettate per incrementare i risultati nell'ossigenazione e la rivitalizzazione dei tessuti, favorendo scambi metabolici e eliminazione delle tossine;
- manipolo elettroporatore con cromo stimolazione led a 4 colori per la veicolazione sui tessuti di "cocktail attivi" snellenti e di contrasto all'inestetismo della cellulite;



US AND ELECTROSTIMULATION

Mya E+ combines the benefits of ultrasound and electrostimulation on same time on the same support. It guarantees immediate and lasting results in slimming, shaping and cellulite imperfection treatments

The **ultrasound** combines localized thermal and micromechanical effects, which make cellulite tissue component structures weak. in particular the adipocyte membranes. Ultrasounds improve vascularisation, tissue massage, local heat production and cause molecular dissociation which leads to cellulite nodule breakup.

The **electrostimulation** act on face and body thank to deep impulses. It improves muscular mass increase, tissue oxygenation and lifting effect. It stimulates the lymphatic-venous circulation, thus providing slimming and lipolytic effects and it increases the body general wellbeing. Controlled currents emissions with different wave forms are modulated at frequencies ranging from 33 Hz to 5.000 Hz to allow for performing personalized and effective programs.

- powerfull and improved ultrasound plates for slimming and cellulite contrasting treatments even more effective, rapid and long-lasting;
- Wave forms designed to enhance the results in oxygenation and regeneration of tissues, helping exchanges and metabolic elimination of toxins;
- Electroporator handpiece with 4 colors chrome stimulation leds that transfers to the tissues "active cocktails" for slimming and for fighting the imperfections of cellulite;

*inestetismo della cellulite
*cellulitis imperfection

*inestetismo della cellulite
*cellulitis imperfection

Alimentazione: 220/250 V. monofase 50/60 Hz
Potenza assorbita: 190 VA MAX

Power Supply: 220/250 V. single phase 50/60 Hz
Absorbed Power: 170 VA MAX

ELETTROSTIMOLAZIONE

Stadio di uscita:
 onda quadra – corrente di Kotz
Frequenza Onda Quadra
 1kHz modulata a 33/66/133/200 Hz
Frequenza Onda di Kotz
 2500/4000 / 5000 Hz modulata a 4/6/8/12/50/75/100 Hz
Corrente di Uscita
 max 80 mA carico da 500 Ω

ELECTROSTIMULATION

Output Stage
 Square wave - Kotz current
Square Wave Frequency
 1kHz modulated at 33/66/133/200 Hz
Kotz Wave Frequency
 2500/4000/5000 Hz modulated at: 4/6/8/12/50/75/100 Hz
OUTPUT CURRENT
 80 mA on a 500 Ω load

LASER INFRAROSSO

Numero di sorgenti: 96
Lunghezza d'onda: 650 nm
Potenza: 672 mw
Classe: IV

ULTRASOUND

Ultrasound Frequency: 3 MHz
Ultrasound Power: < 3 W/cm²
Ultrasound Power: < 3 W/cm²
Ultrasound Power: < 3 W/cm²

BIOIMPEDENCIOMETRIA

Corrente per BIA: 0,8 mA a 5 kHz, 50 kHz, 100 kHz
Numero canali in uscita: 8 canali destri e 8 canali sinistri per ultrasuono, 4 canali destri e 4 canali sinistri per elettrostimolazione regolabili singolarmente per ogni uscita con indicazione di livello analogica e digitale sul display

COSMETIC ABSORPTION AND COLOURS

Output Stage: square wave
Square Wave Frequency: 1,6 kHz modulata at 300 mHz

INFORMAZIONI APPARECCHIATURA

Tempo di trattamento totale: Preprogrammato o impostabile, da 5 a 60 minuti
Fusibili di rete: 2 x 2 A tipo T 5 x 20
Peso: 22 kg
Limiti temperatura: da 5° C a 40° C (durante l'uso)
Classificazione: APPARECCHIATURA PER ESTETICA
 CLASSE I TIPO BF
 DIRETTIVA 2014/35/UE
 DIRETTIVA 2014/30/UE

COSMETIC ABSORPTION AND COLOURS

Max Output Current: 80 mA, load 500 Ω
Ultrasound Power: < 3 W/cm²
Ultrasound Power: < 3 W/cm²
Ultrasound Power: < 3 W/cm²
Ultrasound Power: < 3 W/cm²
Peso: 22 kg

Il costruttore si riserva di apportare senza preavviso le modifiche che riterrà necessarie per una migliore qualità del macchinario.
 The Manufacturer reserves the right to make all unannounced changes he considers necessary to improve the quality of the machine.

100% MADE IN ITALY.

Il Decreto legge del 25 settembre 2009, n. 135 all'articolo 16, comma 4 definisce il made in Italy come segue:

Chiunque fa uso di un'indicazione di vendita che presenti il prodotto come interamente realizzato in Italia, quale «100% made in Italy», «100% Italia», «tutto italiano», in qualunque lingua espressa, o altra che sia analogamente idonea ad ingenerare nel consumatore la convinzione della realizzazione interamente in Italia del prodotto, ovvero segni o figure che inducano la medesima fallace convinzione, al di fuori dei presupposti previsti nei commi 1 e 2, e' punito, ferme restando le diverse sanzioni applicabili sulla base della normativa vigente, con le pene previste dall'articolo 517 del codice penale, aumentate di un terzo.

La produzione Cesare Quaranta risponde alle caratteristiche indicate da tale decreto ed è "100% made in Italy".

100% MADE IN ITALY

Decree-law n. 135 dated September the 25th, 2009, under article 16, comma 4 defines "made in Italy" as follows: Whoever makes use of a sale indication presenting the product as completely made in Italy, like «100% made in Italy», «100% Italy», «all Italian», expressed in any language, or others to mislead consumer into believing that a product is entirely of Italian origin, that is, signs or figures leading to the same fallacious belief, outside the conditions foreseen in the comma 1 and comma 2, is punished, without prejudice to the different sanctions applicable on the base of the normative in force, with the sanctions foreseen under the article 517 of the Penal Code, increased by a third.

Cesare Quaranta production complies with the characteristics indicated by such a decree and it is 100% made in Italy.- Advertisements on radio and local newspapers.

- Organization of "group shopping" promotions

Our strategic view of the communication world makes us a central pillar of your strategy.

Dio, com'è bella e quanto
 sempre, a guardarla, è tutta un dolce incanto!
 Della beltà che in lei
 sempre si spiega io mai sazio sarei.

Stanco giammai: la sua beltà, a guardarla,
 sempre si rinnovella;
 sempre ad ognuno parla
 e di grazia e d'amor. Dio, com'è bella!

Di qua e di là dal mare
 più remoto, e per ogni
 terra, non c'è chi le assomigli: appare
 quale solo nei sogni
 per forse una beltà. Dio, com'è bella!

*la sua beltà, a guardarla, sempre si rinnovella;
sempre ad ognuno parla e di grazia e d'amor.*

Novembre 2012



CESARE
QUARANTA

CESARE QUARANTA s.r.l. Unipersonale

Via Legnanino, 5 - 10023 Chieri (TO) Italy - Tel. +39 0119427967 - +39 0119472132 Fax +39 0119472299
www.cesarequaranta.it - e-mail: info@cesarequaranta.it